

FITTOP

Умный ручной массажер M-HAND



Производитель: Shenzhen Fittop Health Technology Co., Ltd.
Адрес: 3-5F, BLDG4, Hualian Industrial Estate, Xinshi Community, Dalang, Longhua District, Shenzhen, China.
Горячая линия: 400-822-6800; Сайт: www.fittop.com
Страна производства: Китай
Импортер: ООО "Марвел КТ", 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8, эт.27-пом. LXXXVI, тел. +7495 745-80-08

Оглавление

I Описание.....	01
II Внешний вид.....	01
III Работа.....	02
IV Уход и обслуживание.....	04
V Примечания.....	04
VI Диагностика неисправностей.....	05

I Описание

1 Основная информация

Наименование устройства: M-Hand

Модель: FMH931

Размеры: 114,5 мм * 86 мм * 74,5 мм

Вес нетто: 0,37 кг

Номинальная мощность: 5 Вт

Аккумулятор: Литий-ионный полимерный

аккумулятор большой емкости на 3,7 В

Стандарт: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

2 Особенности

Функции: режим массажа, вибрации

Область применения: голова, шея, плечи и другие мягкие области тела

Специальные функции: Зеленая кнопка запоминания, полностью водонепроницаемый корпус,


беспроводная и портативная конструкция, поддержка режима


вибрации, блокировка для удобства в поездках

Таймер автоматического режима: 15 минут

Управление: кнопка

II Внешний вид

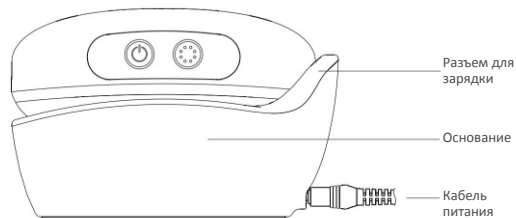

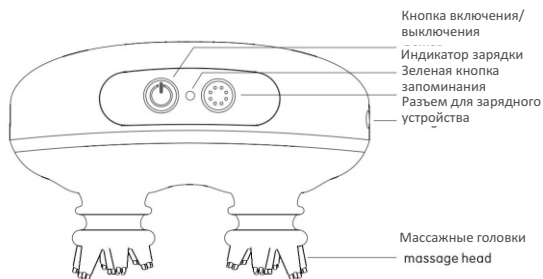


III Работа

1 Пример использования массажера M-Hand



2 Инструкции по применению массажера M-Hand

2.1 Кнопки

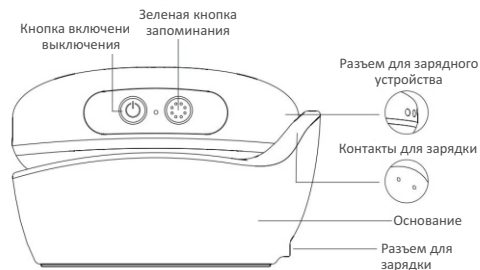

2.2 Зарядка (зарядка не требуется, если аккумулятор полностью заряжен, сразу переходите к следующему шагу)

2.2.1 Установите массажер на основание зарядного устройства и подключите разъем к контактам для зарядки (см. рисунок выше).

2.2.2 Загорится индикатор зарядки и начнется зарядка. Когда индикатор погаснет, значит аккумулятор полностью заряжен.

2.3 Инструкции по применению

Для сохранения заряда и для использования в путешествиях на устройстве предусмотрена специальная кнопка блокировки, чтобы оно не включилось случайно и не израсходовался заряд. При блокировке устройства все его функции отключаются до тех пор, пока не будет снята блокировка.

1. «Короткое нажатие» означает быстрое нажатие, «длинное нажатие» означает нажатие и удержание в течение 3 секунд.

2. На момент отправки с завода-изготовителя устройство заблокировано, поэтому перед началом использования необходимо разблокировать. См. пункт 2.3.3

2.3.1 «Кнопка включения/выключения»

а) Когда массажер выключен, коротко нажмите на кнопку, загорится светодиодный индикатор, массажер включится и перейдет в режим работы на высокой скорости.

б) Когда массажер включен, коротко нажмите на кнопку и нажимайте на нее до тех пор, пока не выберете нужный режим работы. Можно поочередно переключаться между четырьмя режимами: массаж, вибрация + массаж, вибрация.

в) Когда массажер включен, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить его. При выключении массажер автоматически запоминает последний рабочий режим и в следующий раз запускается в этом режиме, если при включении нажать на «зеленую кнопку запоминания»

2.3.2 «Зеленая кнопка запоминания»

Во время работы массажера коротко нажмите на эту кнопку, чтобы запомнить текущий режим. Если нажимать эту кнопку в каждом из режимов, массажер будет поочередно переключаться между высокой и низкой скоростью.

2.3.3 Нажмите «кнопку включения/выключения» и «зеленую кнопку запоминания» одновременно

а) Если коротко нажать эти кнопки во время работы массажера, он выключится, а текущий запомненный режим удалится.

б) Если в любом рабочем режиме массажера (он может быть включен или выключен) нажать и удерживать эти кнопки 3 секунды, массажер выключится с двойной вибрацией и перейдет режим блокировки.

с) В режиме блокировки нажмите и удерживайте эти кнопки 3 секунды, чтобы массажер переключился в рабочий режим с однократной вибрацией, после чего его можно использовать.

IV Уход и обслуживание

1 Уход

1.1 Устройство водонепроницаемое, поэтому можно мыть его водой и моющим средством (не погружайте его в воду на длительное время).

1.2 Протирайте влажной тканью или мойте нейтральным моющим средством, а затем вытирайте насухо.

1.3 Нельзя чистить устройство жесткой щеткой, острыми предметами, мыть бензином и керосином.

2 Обслуживание

2.1 Хранить в коробке в безопасном, сухом и прохладном месте.

2.2 Запрещается хранить в местах с высокой температурой, вблизи источников пламени и под прямыми солнечными лучами, потому что устройство может потускнеть или повредиться.

2.3 Беречь от контакта с бензолом, растворителем или любой другой коррозионно-активной жидкостью.

V Примечания

Из соображений безопасности внимательно изучите следующие правила пользования устройством.

1 Устройство следует применять по назначению, указанному в данном руководстве.

2 Разрешается использовать только оригинальные запчасти.

3 Запрещается пользоваться устройством во время процесса зарядки.

4 Когда аккумулятор полностью заряжен, снимите массажер с зарядки, чтобы не допустить перезарядки.

5 Запрещается хранить в местах с высокой температурой.

6 Запрещается пользоваться неисправным или поврежденным устройством.

Обращайтесь в сервисный центр.

7 Дети могут пользоваться устройством только под наблюдением взрослых.

8 Лица с ограниченными физическими возможностями или пониженной чувствительностью могут пользоваться устройством под наблюдением других лиц.

9 Это устройство не рассчитано на применения в медицинских целях.

10 Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом в следующих ситуациях:

а) Вы беременны или прошло 4 месяца после родов

б) Наличие кардиостимулятора или другого имплантированного медицинского электронного устройства)

с) Наличие нарушений кровообращения или тромбов) Наличие кожной аллергии или кожной инфекции)

д) Наличие остеопороза

11 Рекомендуется использовать не более 15 минут за раз (массажер автоматически отключается по истечении 15-минутной программы массажа).

Если вы хотите использовать его дольше, подождите 30 минут и снова включите его.

12 При слишком длительном использовании устройства, оно может перегреться и срок его службы сократится. Если устройство нагрелось, отключите его. Не включайте его, пока оно не остынет.

13 Запрещается использовать во время вождения.

VI Диагностика неисправностей

Неисправность	Причина/решение
Массажер не запускается	• Аккумулятор разряжен/полностью зарядите аккумулятор перед использованием • Массажер находится в режиме блокировки (для поездок)/разблокируйте его по указаниям в руководстве.
Массажер внезапно перестал работать	• Аккумулятор разряжен/зарядите аккумулятор • Завершился отсчет таймера автоматического режима (15 минут)/снова включите массажер
Массажер издает небольшой шум	• Это нормальный шум при работе механизма массажера

Примечание: Если не удалось устранить неисправность, прекратить пользоваться устройством и обратиться в сервисный центр (см. стикер на упаковке).

Запрещается пытаться ремонтировать устройство самостоятельно.